

Wann benutze ich den TimeWaver Home für mein Pferd?

Sie können den TimeWaver Home täglich benutzen oder mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche.

Wie benutze ich den TimeWaver Home bei meinem Pferd?

Ihr Pferd soll möglichst **ruhig** und **entspannt** die Anwendung genießen können. Wir empfehlen dafür, das Pferd angebunden in die Box oder auf den Putzplatz zu stellen.

Benutzen Sie einen Longiergurt oder Deckengurt um die Elektroden zu befestigen. Machen Sie vorher die gelben Schwämme nass und schieben Sie diese über die Silikonelektroden. Die Elektroden werden dann mit der flachen Seite zum Pferd in den nassen Schwämmchen hinter dem Gurt eingeklemmt (siehe Bild rechts).

Wenn beide Elektroden angeschlossen sind, können Sie das Elektrodenanschlusskabel mit dem TimeWaver Home verbinden.

Wählen Sie das gewünschte Programm unter der Rubrik **Pferd** oder **Tiere allgemein** aus.

Drücken Sie die **Starttaste**, um die Anwendung zu beginnen.

Die Intensität können Sie selbst über die +/- Tasten variieren. **Erhöhen** Sie die **Intensität langsam** auf 10-20 %. Reagiert Ihr Pferd nicht, können Sie die Intensität auf 30-50 % erhöhen.



Da die einzelnen Frequenzen verschieden stark wahrgenommen werden, kann es vorkommen, dass das Pferd beim Wechsel der Frequenzen anfänglich etwas verunsichert ist. Daher empfehlen wir besonders bei der ersten Anwendung, dass sich immer eine **Bezugsperson** in der Nähe des Pferdes aufhält. Die Anwendung sollte immer angenehm für das Pferd sein. Falls das Pferd bei der Anwendung unruhig oder ängstlich wirkt, sollte die Intensität entsprechend reduziert werden.

Bei **Verletzungen am Bein**, können Sie die Elektroden auch am Pferdebein mit den elastischen Bändern (siehe Bild rechts) platzieren. Wichtig: Die Elektroden werden ober- und unterhalb der Verletzung platziert.

Hinweis: Die Elektroden **nicht** auf offene Wunden platzieren und darauf achten, dass kein Wasser aus den Schwämmen in die Wunden gelangt!

Alternativ können Sie auch die **Bifilarspule** verwenden. Hierzu platzieren Sie die mit dem TimeWaver Home verbundene Spule in der unmittelbaren Nähe des Pferdes und starten das gewünschte Programm mit einer Intensität von 100%.

Auch ist eine Anwendung mit **Intensivelektroden** möglich. Die Verwendung der Intensivelektroden wird ausführlich im TimeWaver Home Handbuch erklärt.

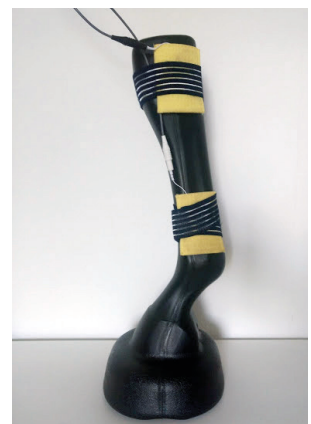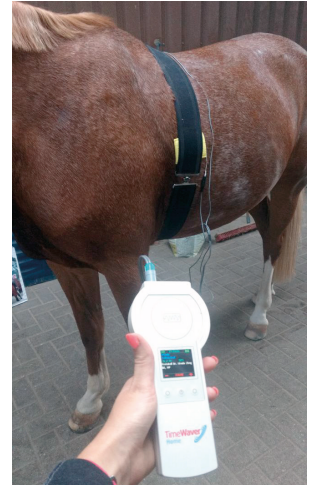

Hinweis: Wissenschaft und Schulmedizin erkennen TimeWaver Home und dessen medizinische und sonstige Anwendungen aufgrund fehlender Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht an.